


OLYMPUS®

Your Vision, Our Future



OES Bronchofiberscope
OLYMPUS BF TYPE 1T60

**Maximum therapeutic and suction capabilities
with an extra-large channel**

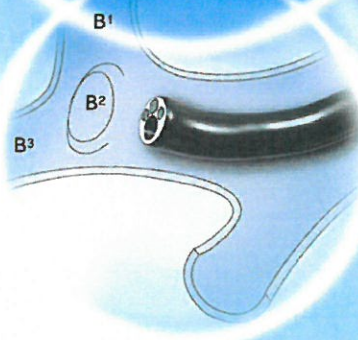


OES Bronchofiberscope

OLYMPUS BF TYPE 1T60




Extra-wide channel accommodates 2.8 mm diameter forceps, greatly enhancing therapeutic capability

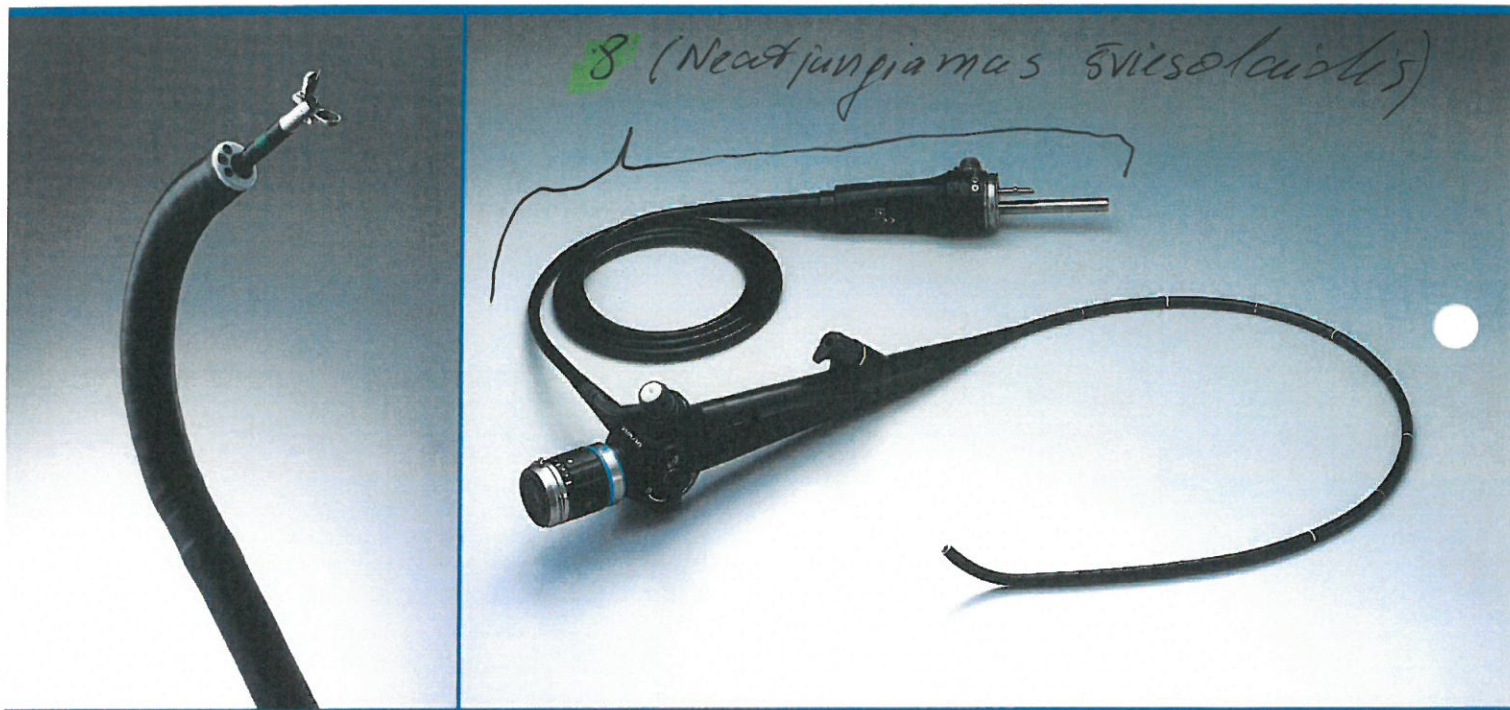

- Extra-wide instrument channel measuring 3.0 mm across enables use of 2.8 mm diameter forceps and increases suction power, while retaining the slim 5.9 mm distal end diameter of its predecessor.
- Wide 120° field of view enables accurate observation of a wider area.
- 180° up/130° down angulation for easier maneuvering in the bronchi.
- 600 mm working length ideal for use in the tracheobronchial tree.
- High-frequency electrosurgical devices can be used with this endoscope.
- Compatible with both OES and EVIS video systems.

Specifications

Optical System	Field of view	120°	-1
	Direction of view	0° (Forward viewing)	
	Depth of field	3~50mm	
Insertion Tube	Distal end outer diameter	5.9mm	-3
	Insertion tube outer diameter	6.0mm	-4
	Working length	600mm	-6
Instrument Channel	Channel inner diameter	3.0mm	-5
	Minimum visible distance	5mm from distal end	
Bending Section	Angulation range	Up180°, Down130°	-2
Total Length		900mm	-7

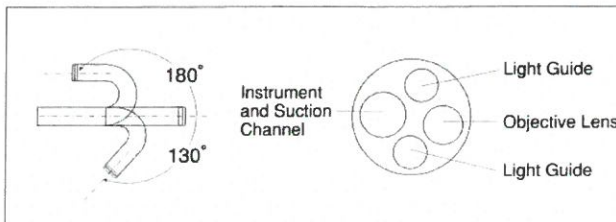

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

OLYMPUS

www.olympus.com

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
OLYMPUS EUROPA GMBH
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg / Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
OLYMPUS AMERICA INC.
2 Corporate Center Drive, Melville, N.Y. 11747-3157, U.S.A.
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 390 Miami, Florida 33126-2087, U.S.A.
KEYMED LTD.
Keymed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, England

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04, Valley Point Office Tower, Singapore 248373
OLYMPUS HONG KONG AND CHINA LIMITED
Room 1520-1527, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
OLYMPUS (BEIJING) SALES & SERVICE CO., LTD.
Room 1401, East Tower, Gong Yuan No.6 Royal Palace, No.6 Gong Yuan Xie, JianGuoMenHei, DongChang District, Beijing, 100005, China
OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
117071, Moscow, Malaya Kaluzhskaya 19, bld. 1, fl.2, Russia
OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD
31 Gilby Road, Mount Waverley, VIC., 3149, Australia

Printed in Japan R395SB-0305

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future



OES bronchofibroskopas

„OLYMPUS“ BF TIPO 1T60

Geriausios gydymo ir išsiurbimo galimybės
dėl itin didelio instrumentų kanalo



OES bronhofibroskopas

1T60 TIPO „OLYMPUS“ BF





Itin plačiame instrumentų kanale telpa 2,8 mm skersmens chirurginės žnyplės, dėl kurių itin pagerėja gydymo galimybės



- Itin plačiame 3,0 mm skersmens instrumentų kanale telpa 2,8 mm chirurginės žnyplės ir užtikrinamas didesnis išsiurbimo galinumas, o tolimojo galo išorinis skersmuo toks pat mažas, koks ir pirmtako (5,9 mm).
- Dėl plataus 120° matomumo lauko galima atidžiai apžiūrėti didesnį plotą.
- Galimybė palenkti 180° kampu aukštyn ir 130° kampu žemyn, kad būtų lengviau manevruoti bronchuose.
- 600 mm darbinis ilgis puikiai pritaikytas dirbti su trachėjos ir bronchų medžiu.
- Su šiuo endoskopu galima naudoti aukšto dažnio elektrochirurgijos prietaisus.
- Suderinamas su OES ir EVIS vaizdo perteikimo sistemomis.

Savybės

Optikos sistema	Matomumo laukas	120°	1
	Vaizdo kryptis	0° (vaizdas į priekį)	
	Lauko gylis	3~50 mm	
Įvedimo vamzdelis	Tolimojo galo išorinis skersmuo	5,9 mm	3
	Įvedimo vamzdelio išorinis skersmuo	6,0 mm	4
	Darbinis ilgis	600 mm	6
Instrumentų kanalas	Kanalo išorinis skersmuo	3,0 mm	5
	Mažiausias matomas atstumas	5 mm nuo tolimojo galo	
Lankstioji dalis	Kampų intervalas	180° aukštyn, 130° žemyn	2
Ilgis iš viso		900 mm	7

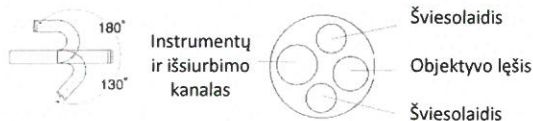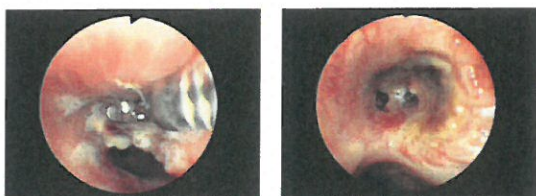

Savybės, modelis ir priedai gali būti keičiami, apie tai nepranešus ir be jokių įsipareigojimų iš gamintojo pusės.


OLYMPUS

www.olympus.com

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
OLYMPUS EUROPA GMBH
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg / Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
OLYMPUS AMERICA INC.
2 Corporate Center Drive, Melville, N.Y. 11747-3157, U.S.A.
OLYMPUS LATIN AMERICA, INC.
6100 Blue Lagoon Drive, Suite 350 Miami, Florida 33126-2067, U.S.A.
KEYMED LTD.
Keymed House, Slock Road, Southend-on-Sea, Essex SS2 5QH, England

OLYMPUS SINGAPORE PTE LTD.
491B River Valley Road #12-01/04 Valley Point Office Tower, Singapore 248373
OLYMPUS HONG KONG AND CHINA LIMITED
Room 1520-1527, Ocean Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
OLYMPUS (BEIJING) SALES & SERVICE CO., LTD.
Room 1401, East Tower, Gong Yuan Nali Royal Palace, Nuli Gan Yuanjiye, Jia Guo Menhe, Dongcheng District, Beijing, 100005, China
OLYMPUS MOSCOW LIMITED LIABILITY COMPANY
117071, Moscow, Malaya Kaluzhskaya 10, bld. 1, fl. 2, Russia
OLYMPUS AUSTRALIA PTY LTD
31 Gilby Road, Mount Waverley, VIC., 3149, Australia

Išspausdinta Japonijoje R3955B-0305

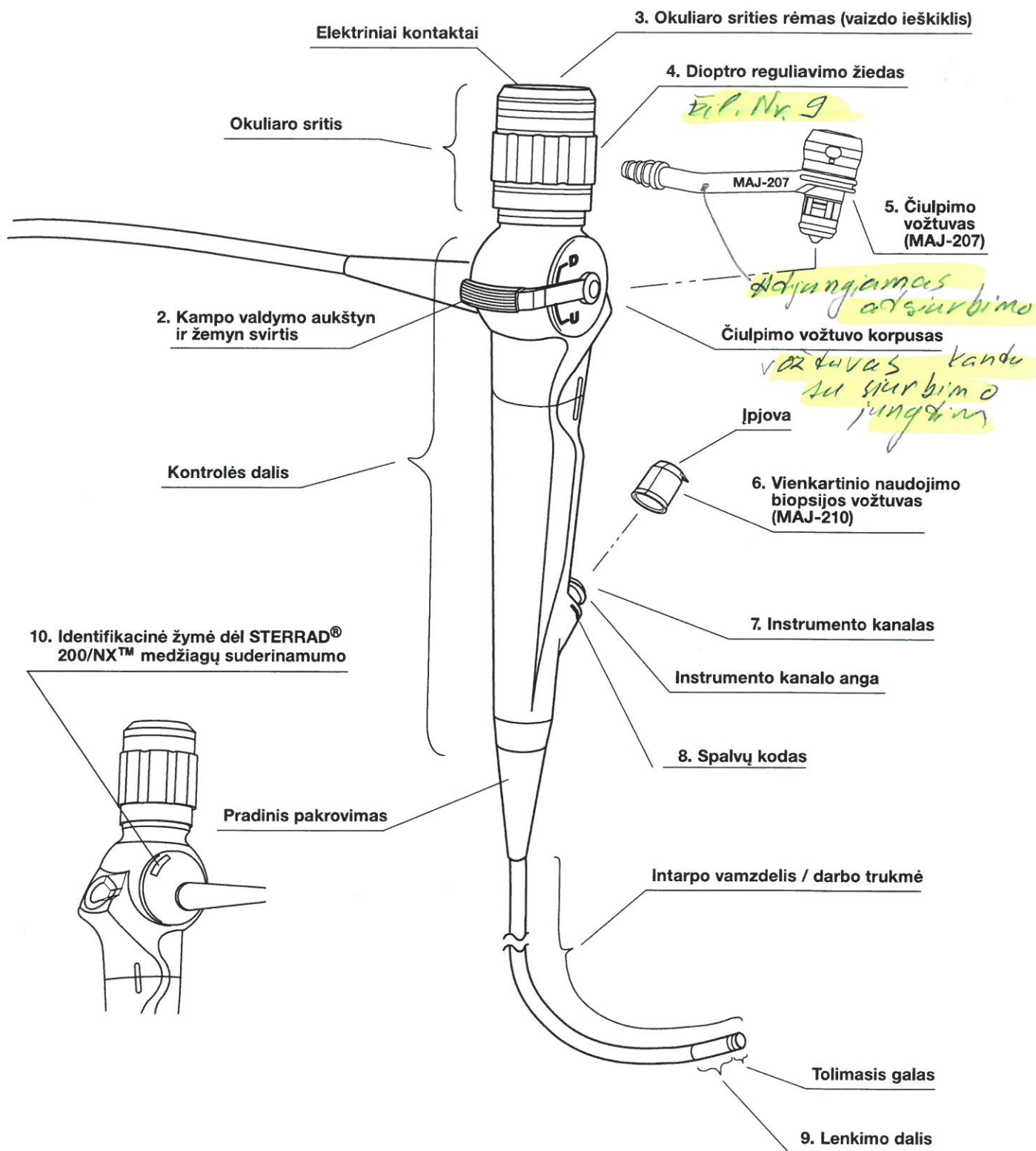


Skyrius 1 Pakuotės turinio tikrinimas

Suderinkite visas detales pakuotėje su komponentais, nurodytais žemiau.

Patikrinkite kiekvieną detalę, ar ji nesugadinta. Jeigu įrenginys yra sugadintas, trūksta kurios nors detalės arba jums iškilo klausimų, nenaudokite įrenginio; nedelsdami susisiekite su "Olympus".

Prieš parduodant šis instrumentas nebuvo dezinfekuotas ar sterilizuotas. Prieš naudodami šį instrumentą pirmą kartą, dezinfekuokite jį laikydamiesi instrukcijų, pateiktų pridėtame endoskopo naudojimo vadove "PAKARTOTINO PROCESO VADOVAS", kuriame aprašytas jūsų endoskopo modelis.

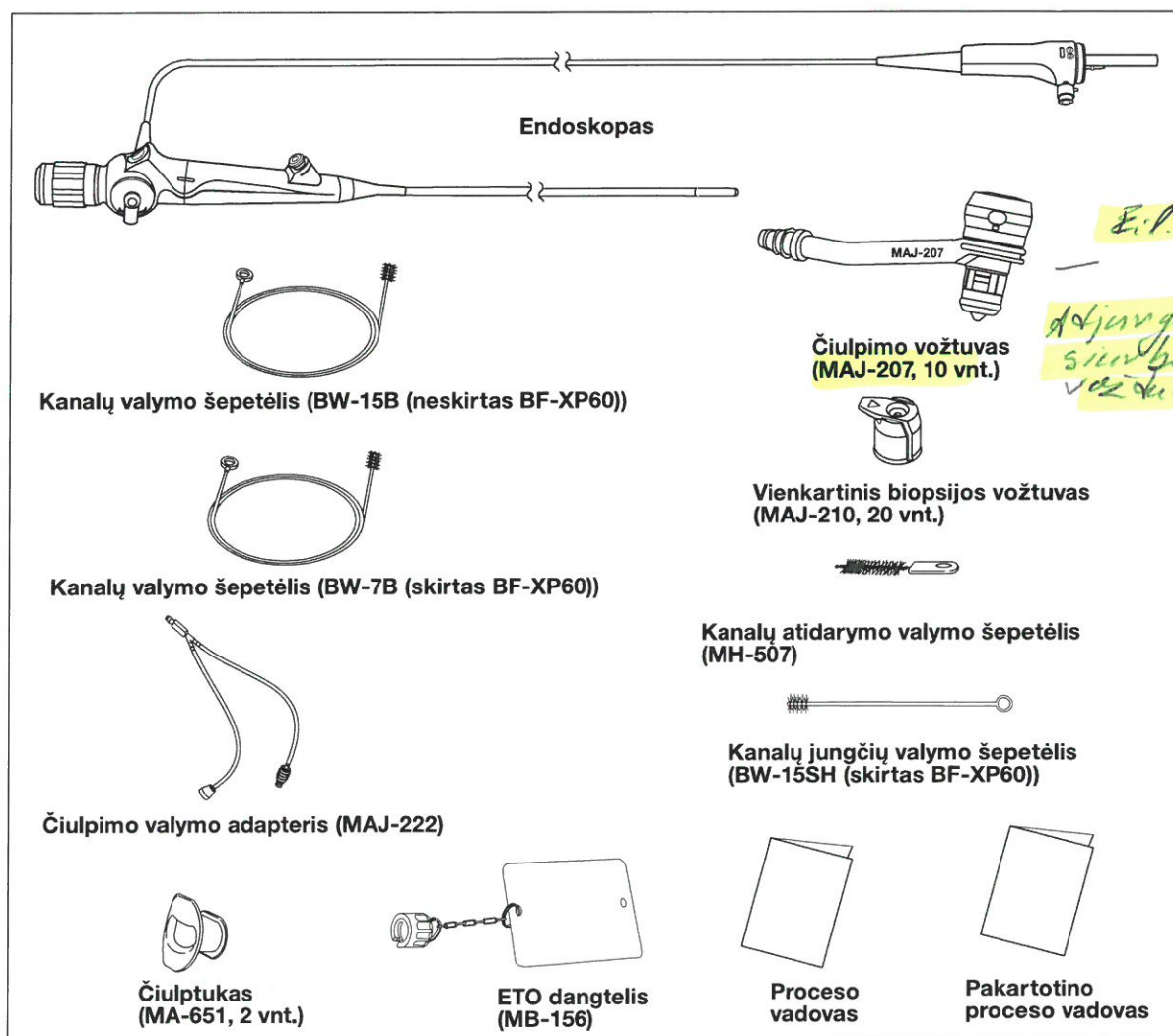

Priedas

Derinama įranga

■ **Sistemos schema**

Įranga, rekomenduojama naudoti su šiuo vaizdo sistemos centru, išvardyta toliau. Su šiuo vaizdo sistemos centru galima naudoti ir naujesnius, po jo gamybos pradžios pradėtus gaminti prietaisus. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Olympus“.

ĮSPĖJIMAS

Jeigu naudojama čia neminima įranga, visą atsakomybę turi prisiimti medicinos įstaiga. Naudojant nerekomenduojamą papildomą įrangą gali ne tik sutrikti įrangos veikimas, bet ir kilti pavojus pacientui ir medicinos personalui. Taip pat negalima užtikrinti vaizdo sistemos centro ir papildomos įrangos patvarumo. Jeigu dėl šios priežasties atsiranda sutrikimų, nemokamas garantinis remontas netaikomas. Naudokite tik rekomenduojamą įrangą.

Pried.

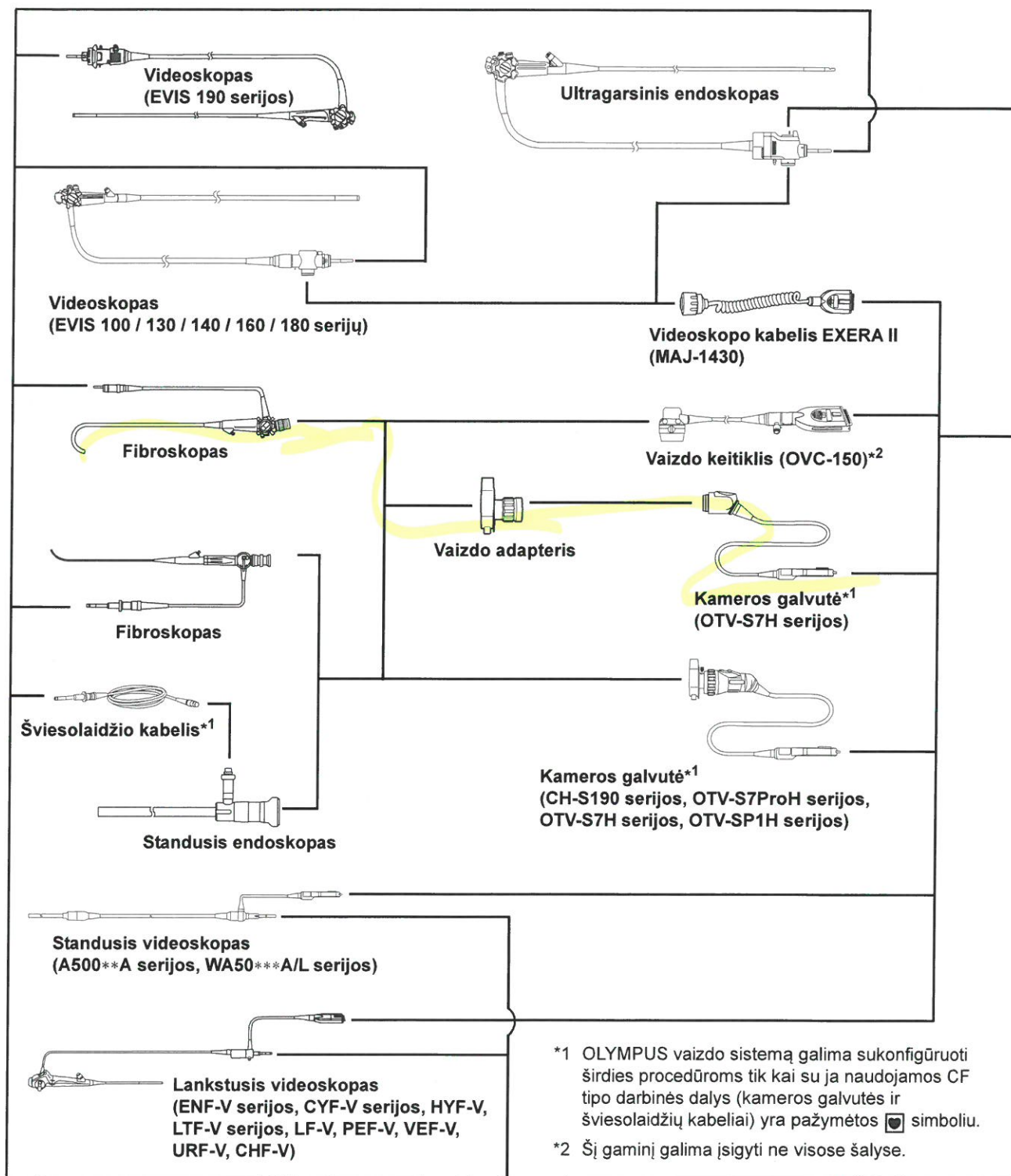


Fig. Nr. 10


suderinamas su vaizdo sistema EVIS EXERA

Derinama įranga

○ Sistemos schema



Pried.

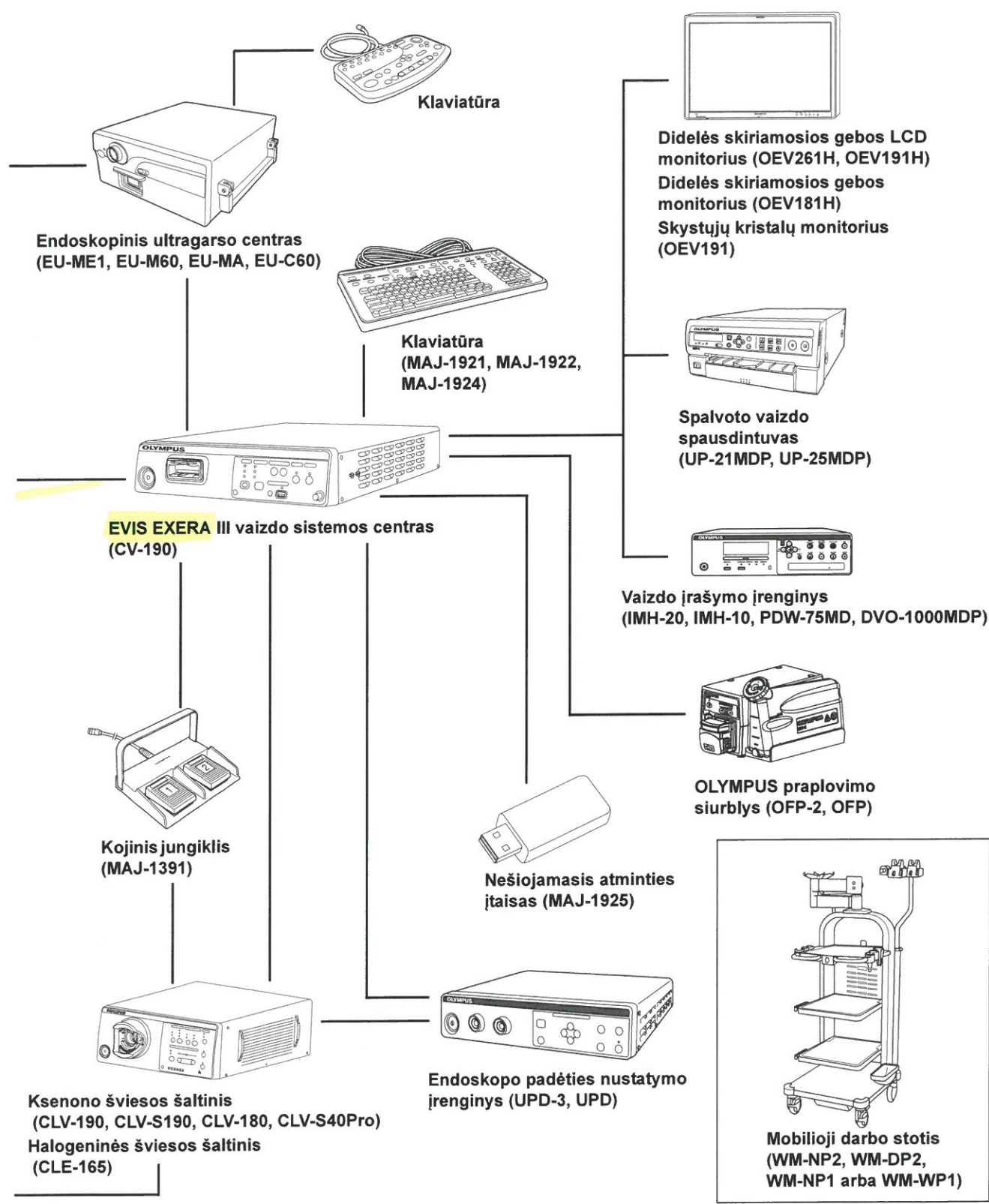


Pried.

6.3 Endoskopo prijungimas

■ Fibroskopas ir kameros galvutė arba OES vaizdo keitiklis

Fibroskopą prie vaizdo sistemos centrojunkite naudodami kameros galvutę arba OES vaizdo keitiklį.

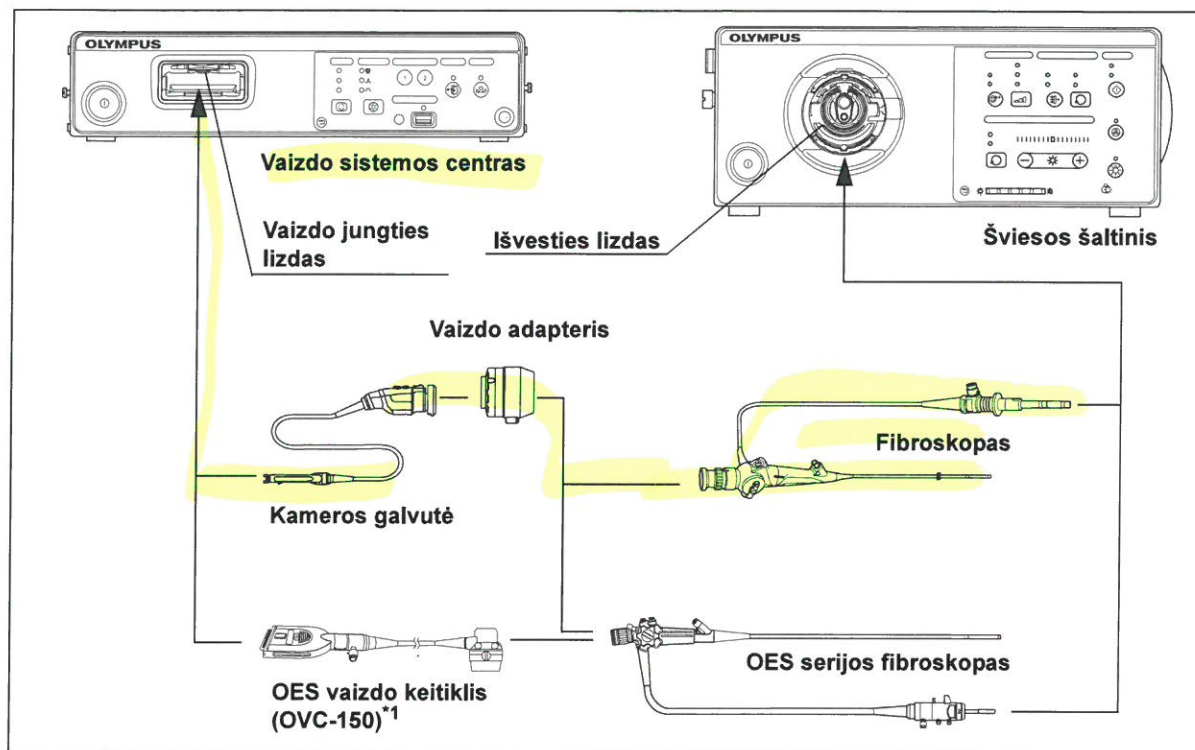

*1 Šį gaminį galima įsigyti ne visose šalyse.

6 sk.

6.7 pav.

- 1 Įsitikinkite, kad vaizdo sistemos centras ir visi prijungti įrenginiai yra IŠJUNGTI.
- 2 Įsitikinkite, kad vaizdo sistemos centro vaizdo jungties lizde esantys elektros kontaktai nėra pažeisti.
- 3 Įsitikinkite, kad kameros galvutės arba OES vaizdo keitiklio jungtys nėra pažeistos.
- 4 Prijunkite fibroskopo endoskopo jungtį prie šviesos šaltinio (žr. 6.7 pav.) vadovaudamiesi šviesos šaltinio instrukcijų vadovo nurodymais.

Priedas

Sistemos komplektacija

Žemiau pateikiamos galimų kartu naudoti prietaisų ir priedų kombinacijos. Su šiuo prietaisu gali būti naudojami ir nauji priedai, sukurti ir pagaminti po to, kai buvo sukurtas ir pagamintas šis prietaisas. Kilus neaiškumams kreipkitės į Olympus.

Ispėjimas

Jei naudojamos kitos prietaisų kombinacijos, nei nurodyta žemiau, toliau atsakomybę prisiima tai daranti medicininė įstaiga.

Sistemos komplektacija

